

CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA **SECTOR VETERINARIO**



Albor
Químicos

LÍNEA DE MICROBIOLOGÍA

Coloración de Gram

- Violeta de Gram
- Lugol de Gram
- Etanol Cetona
- Safranina de Gram
- Fucsina de Gram
- Láminas de control de calidad y coloración de Gram y coloración de Ziehl Neelsen

Coloración de Ziehl Neelsen

- Fucsina Fenicada ZN
- Alcohol Ácido ZN
- Azul de Metileno ZN (Loeffler)
- Láminas control coloración ZN

LÍNEA DE HEMATOLOGÍA

ColorQuick

Cubetas Coplin

Natt & Herrick's

Coloración de Wright

- Wright
- Buffer Giordano

Anticoagulantes

- EDTA
- Citrato de Sodio

Otros

- Azul de Cresil Brillante
- Oxalato de Amonio 1%
- Cloruro de Sodio 0.85% y 0.9%
- Ácido Acético Diluido al 3%

Reactivo de Turk

Drabkin

Cloruro de Calcio 0.025M

LÍNEA ESPERMOGRAMA

Líquido Espermograma

Eosina 1%

LÍNEA UROANÁLISIS Y PARASITOLOGÍA

Ácido Sulfosalicílico

Lugol Parasitológico

Nair

Coloración de Giemsa

- Giemsa
- Field Azul de Metileno Fosfatado
- Field Sales Fosfatadas

Lámina Cóncava

Coloración de Field

- Field Azul de Metileno Fosfatado
- Field Sales Fosfatadas
- Field Solución A
- Field Solución B

Sudán III

Azúcares Reductores

- Reductest

LÍNEA MICOLOGÍA

- Hidróxido de Potasio 10%
- Hidróxido de Potasio 20%
- Hidróxido de Potasio 40%
- Azul de Lactofenol

INDICADORES DE PH

- Azul de Bromotimol
- Bromosulftaleína 0,5%
- Fenolftaleína

AGUA

- Agua Destilada
- Agua Desionizada

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- DeterPlus
- DeterPlus Alcalino
- DeterPlus Enzimático
- Hipoclorito de Sodio 5% y 13%
- Peróxido de Hidrógeno 30%
- KleanSpray

PRODUCTOS VARIOS

- Aceite de Inmersión
- Alcohol Etílico 95%
- Alcohol Etílico 70%
- Alcohol Isopropílico
- Alcohol Isopropílico 70%
- Alcohol Metílico
- Formol Isotónico 10%
- Formol Isotónico 5%
- Formol Bufferado
- Xilol
- Biosorb

OTROS

- TersusGel



**LÍNEA DE
MICROBIOLOGÍA**

Coloración de Gram

Albor
Químicos

Es una tinción diferencial que permite la clasificación bacteriana de acuerdo a su morfología, estructura y agrupación bacteriana en dos grandes grupos, bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas.



Violeta de Gram

Se utiliza como colorante primario.



Lugol de Gram

Es un fijador del Violeta de Gram.



Etanol de Gram

Es un decolorante en el procedimiento en el proceso de tinción de Gram.



Fucsina de Gram y Safranina de Gram

Son colorantes de contraste, ofrecen una excelente calidad en la tinción de Gram.



Láminas de Coloración de Gram

Son láminas que contienen cepas control de microorganismos E.coli ATCC25922 (Gram Negativos) y S.aureus ATCC 25923 (Gram positivos). Son de gran utilidad en el laboratorio para evaluar el desempeño y la calidad de los colorantes en la coloración de Gram para garantizar un diagnóstico más confiable.

Coloración de Ziehl Neelsen

Albor
Químicos

Es una tinción diferencial usada para la identificación de BAAR (bacilos ácido alcohol resistentes), como bacterias del género *Mycobacterium*, *Nocardia* y *Actinomicetes* y la detección de parásitos coccideos como *Cryptosporidium* en muestras de materia fecal.



Fucsina Fenicada ZN

Se utiliza como colorante primario, durante el proceso se calienta la Fucsina para permitir el ingreso del colorante a la pared celular de las Micobacterias.



Alcohol Ácido ZN

Es un decolorante en el proceso de la tinción de Ziehl Neelsen.

Azul Metileno ZN

Es un colorante de contraste, permitiendo destacar las células y estructuras complementarias en la coloración de Ziehl Neelsen.



Láminas de Coloración de Ziehl Neelsen

Son láminas de gran utilidad en el laboratorio para evaluar el desempeño y la calidad de los colorantes en la coloración de Ziehl Neelsen para detectar los BAAR (Bacilo ácido-alcohol resistentes) y poder garantizar un diagnóstico más confiable.



**LÍNEA DE
HEMATOLOGÍA**




ColorQuick

Es una de las coloraciones de tipo Romanowsky más práctico y rápido utilizado en laboratorios para la tinción de diversas células; permite que las muestras sean fijadas y guardadas para estudios posteriores. Este kit de colorantes se utiliza para:

Tinción diferencial de frotis de sangre útil en reconocimiento de células hematopoyéticas y sus variaciones patológicas, para el recuento diferencial de glóbulos rojos, estudio morfológico de leucocitos, permiten diferenciar gránulos, vacuolas y otras estructuras como parásitos y bacterias.

Frotis medulares (mielogramas) La detección de parásitos tisulares y sanguíneos en micología de humanos y veterinaria.

El estudio citológico de muestras como orina, estudios en medula ósea, citologías vaginales de hembras caninas, muestras de espermatozoides entre otros fluidos.

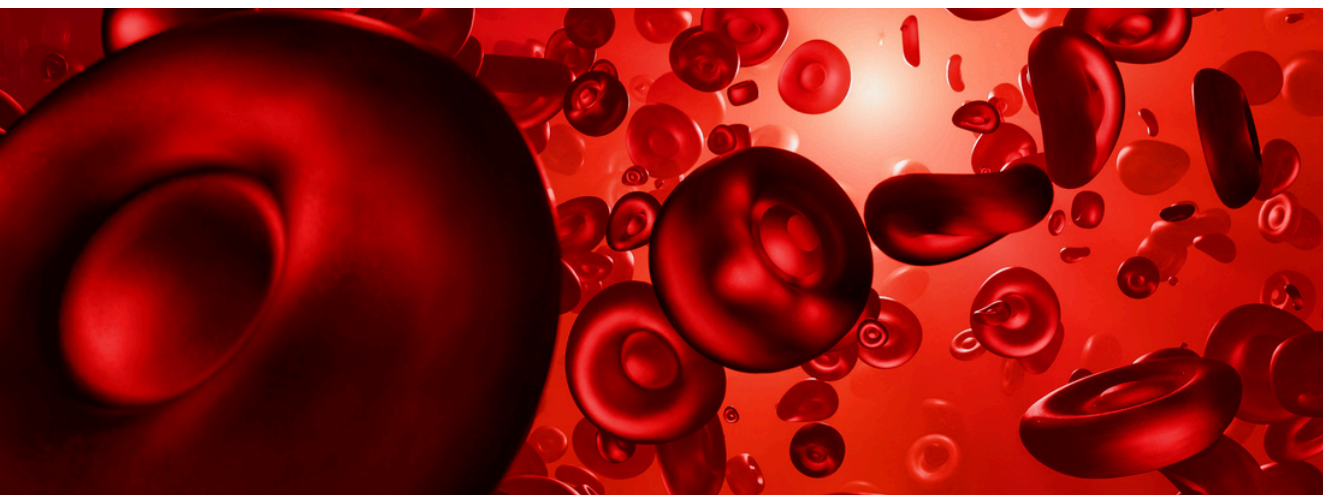



Cubetas Coplin

Las Cubetas Copplin optimizan el proceso de tinción. Son ideales para sumergir láminas portaobjetos y muestras histológicas, asegurando una tinción rápida y eficiente.

Contenido:

- Cubeta 1 para ColorQuick Fijador
- Cubeta 2 para ColorQuick I
- Cubeta 3 para ColorQuick II

Presentaciones: 3 Cubetas (1 Fijador Colorquick, Colorquick I, Colorquick II)



Natt & Herrick's

Tinción para el recuento de eritrocitos y leucocitos en sangre de aves y reptiles.

Coloración de Wright

Una de las coloraciones tipo Romanowsky para la lectura de frotis de sangre periférica, útil para el reconocimiento de las células hematopoyéticas y sus variaciones patológicas.



Wright

Se utiliza como colorante y fijador en la coloración de Wright.

Ofrece una apropiada coloración de extendidos, debido a la adecuada concentración de sus componentes.

Buffer Giordano

Es una solución amortiguadora en la coloración de Wright, sirve para mantener un equilibrio de pH en la tinción para garantizar que las estructuras celulares se mantengan estables y no presenten variaciones morfológicas en su composición celular durante la coloración.



Anticoagulantes

EDTA

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, se utiliza como anticoagulante en muestras de sangre venosa para su posterior análisis en hematología en el laboratorio clínico.



Anticoagulantes

Citrato de Sodio 3.8%

Es un reactivo de diagnóstico *in vitro*, utilizado para análisis de componentes sanguíneos, como anticoagulante de muestras de sangre venosa, para posterior análisis en hematología, estudios de coagulación y para la velocidad de sedimentación globular.



Otros



Azul Cresil Brillante

Es un reactivo de diagnóstico *in vitro*, utilizado para la coloración de reticulocitos y su posterior recuento. Colorante supravital que tiñe intensamente los restos de RNA de los reticulocitos, destacándolos y facilitando su identificación.



Oxalato de Amonio 1%

Recuento de plaquetas en cámara de Neubauer.



Cloruro de Sodio 0.85 y 0.9%

Es un reactivo de diagnóstico *in vitro*, utilizado para el montaje de coproparasitológicos. Brinda un medio Isotónico.

Ácido Acético diluido al 3%

Es un reactivo de diagnóstico *in vitro*, utilizado en el recuento de glóbulos blancos en muestra de sangre total.

Facilita el recuento de los leucocitos que se observan refringentes.





Turk Reactivo

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado en el recuento de glóbulos blancos en muestra de sangre total. Facilita el recuento de los leucocitos que se observan refringentes y ligeramente teñidos.



Drabkin

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado para análisis de componentes sanguíneos, en la determinación de concentración de hemoglobina.



Cloruro de Calcio 0.025M

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado para análisis de componentes sanguíneos, en la determinación del Tiempo parcial de tromboplastina (PTT).






**LÍNEA DE
ESPERMOGRAMA**



Líquido Espermograma

El Líquido espermograma Albor es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado para el recuento de espermatozoides.

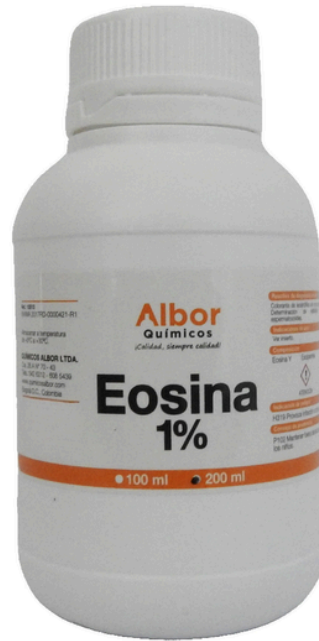


Eosina 1%

La Eosina 1% Albor es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado para la coloración de eosinófilos en moco nasal y la determinación de viabilidad de espermatozoides.





LÍNEA UROANÁLISIS Y PARASITOLOGÍA

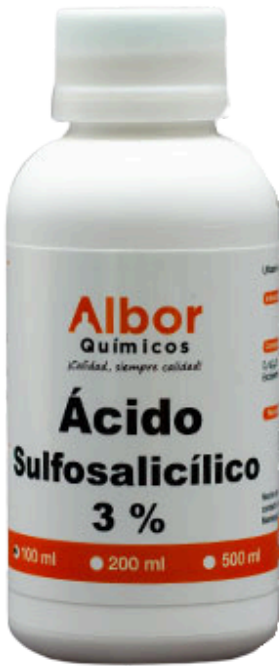

Ácido Sulfosalicílico 3%

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado para determinación de proteínas en orina.

Lugol Parasitológico

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado para el montaje de coproparasitológicos. Destaca las estructuras parasitarias en muestras de materia fecal.



Nair

El Nair azul de metileno amortiguado Albor, es un reactivo de diagnóstico utilizado para destacar los trofozoitos de protozoos intestinales en muestras biológicas.

Coloración de Giemsa

Se utiliza principalmente para coloración de gota gruesa, extendidos sanguíneos y para la identificación de hemoparásitos como [Babesia](#), [Anaplasma](#), [Dirofilaria](#), [Tripanosoma](#), también se utiliza para el análisis de otras muestras biológicas en [Patología](#), [Citohistología](#), [Citogenética](#).



Giemsa

Se utiliza principalmente para coloración de gota gruesa, extendidos sanguíneos y otras muestras biológicas, en las cuales se observa una apropiada tinción que permite la diferenciación de las estructuras.

Field Azul de Metileno Fosfatado

Se utiliza en la precoloración de gota gruesa para el diagnóstico de paludismo, método Romanowsky modificado. Este reactivo inicia el proceso de deshemoglobinización y permite un mejor contraste.



Field de Sales Fosfatadas

Se utiliza como diluyente en la coloración de Field ALBOR, permitiendo una excelente coloración gracias a su pH óptimo, según la técnica de Romanowsky modificado.

Coloración de Field

Se utiliza principalmente para coloración de gota gruesa, extendidos sanguíneos y para la identificación de hemoparásitos como *Babesia*, *Anaplasma*, *Dirofilaria*, *Tripanosoma*, y en especial para el diagnóstico de malaria *Plasmodium*.

- Field Azul de Metileno Fosfatado
- Field de Sales Fosfatadas



Field Solución A

Se utiliza como colorante básico, en la coloración de gota gruesa para el diagnóstico de paludismo, método Romanowsky modificado.

Ofrece una apropiada tinción que permite la diferenciación de las estructuras.

Field Solución B

Se utiliza como colorante ácido, en la coloración de gota gruesa para el diagnóstico de paludismo, método Romanowsky modificado.

Ofrece una apropiada tinción que permite la diferenciación de las estructuras.



Lámina Cóncava

Lámina de superficie cóncava en acrílico, cuyas características permiten realizar en forma práctica la coloración de gota gruesa. Sus bases paralelas, le sirven de soporte, la estabilizan, evitan que se incline y que se derrame la mezcla colorante.

Es utilizada en la coloración de gota gruesa, para facilitar el proceso de deshemoglobinización. Permite la coloración simultánea, hasta de 5 láminas. Se puede utilizar como soporte para coloración de Gram o Wright, al ubicarla con sus bases hacia arriba.



Sudán III

Colorante Sudán en solución alcohólica. Para la determinación de grasas en heces. Sudán III es una prueba de tamizaje, rápida y económica. El sudán III colorea las grasas que se ven en forma de gotas color naranja intenso en el microscopio.

Prueba cualitativa para el estudio de heces sospechosas de presentar ácidos grasos en su contenido. Adicionar 15 gotas de Sudan III a una muestra de 0.5 g de materia fecal, mezclar y observar al microscopio.

Azúcares Reductores

Reductest

Determinación de azúcares reductores e intolerancia a la lactosa. Detección cualitativa de azúcar y otra sustancia reductora en una muestra de orina o materia fecal.

- Nueva formulación.
- Más estable y seguro.
- Empacado al vacío.





LÍNEA
MICOLOGÍA



Hidróxido de Potasio 10%

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado en el examen directo de muestras de piel, en búsqueda de estructuras micóticas. Facilita la visualización de estructuras micóticas presentes en muestras de piel.

Hidróxido de Potasio 20%

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado en el examen directo de muestras de pelo, en búsqueda de estructuras micóticas. Facilita la visualización de estructuras micóticas presentes en muestras de pelo.



Hidróxido de Potasio 40%

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado en el examen directo de muestras de uñas, en búsqueda de estructuras micóticas. Facilita la visualización de estructuras micóticas presentes en muestras de uñas.

Azul de Lactofenol

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado como medio de montaje para el estudio microscópico de cultivos de hongos.

Colorea las estructuras micóticas diferenciando sus características y facilitando su identificación.





INDICADORES DE PH

INDICADORES DE PH



Azul de Bromotimol

Es un indicador de pH, su intervalo de viraje o cambio de color se observa a partir de 6.0 de color amarillo a 7.6 de color azul. Se utiliza en el control de calidad para el lavado de material.

Los restos de detergente o cualquier sustancia que genere una reacción de cambio pH y que estén presentes en material que no ha sido bien lavado, son detectados con el Azul de Bromotimol de Albor.

Uso exclusivo en el laboratorio.

Bromosulfaleína 0.5%

Control de calidad para el lavado de material para análisis químico como indicador de pH a través del cambio de color.



Fenolftaleína

Se utiliza como solución indicadora de punto final en titulaciones ácido-base.

En disoluciones ácidas permanece incoloro y en disoluciones básicas vira a rosado en pH de 8.2 a 9.6.



AGUA





Agua Destilada

El Agua destilada Albor es de uso exclusivo en laboratorio, para lavado de material, reconstitución de reactivos, preparación de soluciones y generación de vapor en equipos como autoclaves industriales.

Utilizar máximo 30 días desde su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.

Agua Desionizada

El Agua desionizada Albor es de uso exclusivo en laboratorio, para lavado de material, reconstitución de reactivos, preparación de soluciones y generación de vapor en equipos como autoclaves industriales.

Utilizar máximo 30 días desde su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.

Es ideal para el uso en química analítica, es un agua pura y libre de iones como sodio, calcio, hierro, cobre, fluoruros, cloruros entre otros.





**LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN**



DeterPlus®

Es un detergente para la limpieza de áreas y superficies. Ideal para el lavado eficiente de pisos, paredes y superficies en general gracias a su alto poder desengrasante.

Aplica a cualquier tipo de industria.

DeterPlus® Enzimático

Es un detergente de uso industrial e institucional diseñado especialmente para la limpieza y eliminación de restos de residuos orgánicos en áreas, utensilios industriales, materiales utilizados en el laboratorio clínico, material odontológico, instalaciones hospitalarias, instituciones clínicas y área veterinaria. Contiene enzimas que actúan sobre los principales componentes orgánicos como proteínas y lípidos, para degradar efectivamente los residuos orgánicos.



DeterPlus® Alcalino

Es un detergente de uso industrial e institucional, indicado para la limpieza de pisos, paredes, material de vidrio, áreas y toda clase de superficies. Especial para suciedad difícil de remover o incrustada y grasas adheridas.



Hipoclorito de Sodio 5% y 13%

Solución acuosa germicida utilizada para la desinfección de áreas y superficies. Ideal para desinfección en superficies duras, el producto puede ser corrosivo.



Peróxido de Hidrógeno 30%

Peróxido de hidrógeno para uso institucional. Desinfectante bactericida, fungicida, virucida, con efectos oxidantes que dificultan la germinación de esporas.

Ideal para descontaminar ambiental y sanitariamente áreas y superficies.

KleanSpray®

Solución desinfectante a base de alcohol al 69% más germicida, para uso a nivel institucional. No requiere enjuague. Ideal para desinfección de áreas y superficies en general, artículos delicados, escritorios, teclados, manijas, teléfonos, etc.





**PRODUCTOS
VARIOS**

Aceite de Inmersión

Ofrece una alta resolución de la imagen dada por el microscopio en objetivo 100X, gracias a su óptimo índice de refracción y excelente viscosidad.

Además, brinda una excelente nitidez en la visualización al microscopio, ya que elimina la desviación de los rayos de luz, dispensando una gota sobre la preparación a observar. No daña los lentes, no se seca y es químicamente inerte.



Alcohol Etílico al 70% y 95%

Alcohol para la preparación de soluciones de desinfección o para usarse como desinfectante en áreas y superficies.

Ideal para desinfección.

PRODUCTOS VARIOS

Albor
Químicos



Alcohol Isopropílico

Es un compuesto líquido, transparente, inflamable y soluble en agua, para uso exclusivo en el laboratorio en análisis químico, como disolvente y en producción química.

Alcohol Metílico

Es un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizado para fijar extendidos y coloraciones como la coloración de eosinófilos en moco nasal.



Formol 5% y 10%

Es un preservante químico utilizado para mantener estructuras parasitarias como quistes de protozoos, huevos y larvas de helmintos en muestra de materia fecal.

Formol Bufferado

Es una solución para fijar piezas y tejidos anatómicos en procesos de histología y patología anatómica. Contiene formaldehído disuelto en buffer fosfatos. Al ser una solución tamponada previene el choque osmótico en contacto con la muestra. Provoca escasa retracción tisular.



Xilol

Es un solvente utilizado en limpieza de microscopios, sus objetivos y material en el laboratorio.

En histología se emplea en los pasos iniciales como solvente de la parafina en los cortes (desparafinización) y en los últimos pasos de preparado de muestras (tinción y montaje) como líquido intermediario o "aclaramiento".

Biosorb

Gelifica residuos de sangre y fluidos corporales, manteniéndolos en estado gel, para su posterior desecho.

Se utiliza como gelificante de sangre y fluidos biológicos, disponiendo 1 gramo (1 cucharita incluida) de Biosorb Albor por cada 50 ml del fluido a desechar.

- El recipiente que contenga el desecho, se debe disponer como residuo biológico.
- Es de uso exclusivo de laboratorio.
- No gelifica fluidos mucoides.
- No inactiva biológicamente los fluidos.



Biosorb con Inactivador

Inactiva residuos de sangre y fluidos corporales, manteniéndolos en estado gel, para su posterior desecho.

Se utiliza como gelificante de sangre y fluidos biológicos, disponiendo de 1 a 2 gramos de Biosorb Albor por cada 50 ml del fluido a desechar.

- El recipiente que contenga el desecho, se debe disponer de acuerdo a su naturaleza.
- Es de uso exclusivo de laboratorio.
- No gelifica fluidos mucoides.

TersusGel®

Gel Antibacterial con Alcohol al 69% y alcohol isopropílico, potente bactericida que garantiza una adecuada desinfección de manos, protege, humecta y suaviza las manos. Amigable con el medio ambiente.

Ideal para higienizar las manos de acuerdo a las necesidades de los protocolos de bioseguridad en cualquier tipo de industria.



OTROS